


MEDICON eG · GERMANY · 47° 57' 31.4" N · 8° 46' 58.6" E



DANIEL - GUBISCH
Rib|Harvest|Set

Instrumente für die Rippenspanentnahme
Instruments for Rib Graft Harvesting

medicon[®]

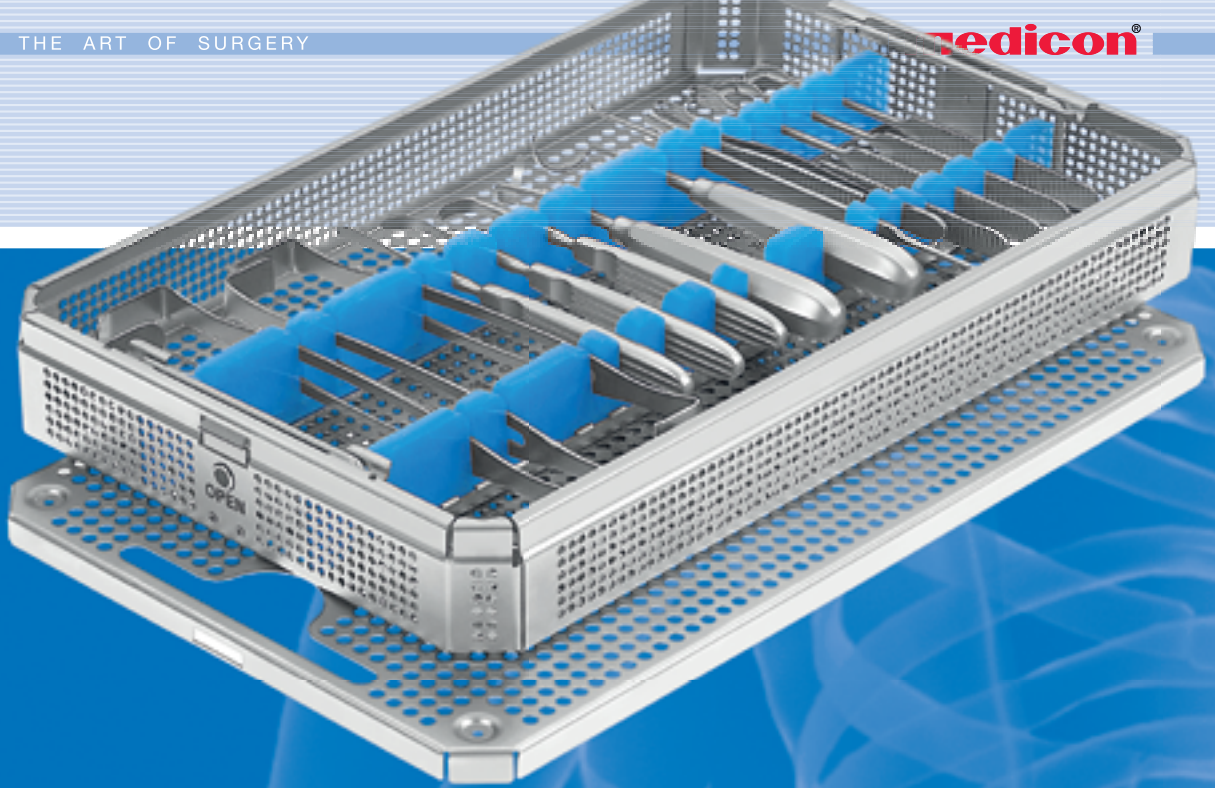

DANIEL - GUBISCH

Rib Harvest Set

Satz komplett
Set complete

54.30.10

07.15.15	RUSS. MODELL Tissue forceps · 15 cm	1x
20.12.75	STRANDELL-STILLE Retractor · 6 x 15 mm · 17 cm	2x
20.60.03	Retractor · 3 teeth · sharp · 8 mm · 17 cm	2x
22.18.21	PARKER-LANGENBECK (US ARMY) Retractor · double-ended · 21 cm · set/2	1x
22.18.22	PARKER-LANGENBECK (US ARMY) Retractor · double-ended · serrated · 21 cm · set/2	1x
26.48.10	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · slight curved · 17.5 cm	1x
26.48.12	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · medium curved · 17 cm	1x
26.48.14	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · strong curved · 16 cm	1x
54.30.05	DANIEL-GUBISCH Rib raspatory · right · 5 mm · sharp · 17 cm	1x
54.30.06	DANIEL-GUBISCH Rib raspatory · left · 5 mm · sharp · 17 cm	1x
67.16.25	DANIEL-GUBISCH Raspatory · double-ended · 4 mm · sharp/abrasive · 21.5 cm	1x
49.90.06	Tray (without instruments)	1x

bestehend aus:
consisting of:

**Set für die Rippenspanentnahme
Set for Rib Graft Harvesting****Instrumente für die Rippenspanentnahme
Instruments for Rib Graft Harvesting**

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:
Developed in cooperation with:



Rollin K. Daniel, MD
Board Certified Plastic Surgeon, Newport Beach
USA



Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Wolfgang Gubisch
Klinik für Plastische Gesichtschirurgie, Stuttgart
Germany



Das Set ist speziell für plastische Chirurgen konzipiert um Rippenknorpel durch kleine Inzisionen für die ästhetische und rekonstruktive Chirurgie (Rhinoplastik, Ohrekonstruktion) zu gewinnen.

The set was especially designed for plastic surgeons for obtaining rib cartilage for aesthetic and reconstructive surgery (rhinoplasty, ear reconstruction) through small incisions.



Set für die Rippenspanentnahme
Set for Rib Graft Harvesting



07.15.15
 15 cm - 6"
 Russ. Modell



22.18.21
 21 cm - 8¼"
 Parker-Langenbeck
 (US Army)



22.18.22
 21 cm - 8¼"
 Parker-Langenbeck
 (US Army)



26.48.10
 17,5 cm - 7"
 Daniel-Gubisch



26.48.12
 17 cm - 6¾"
 Daniel-Gubisch



26.48.14
 16 cm - 6¼"
 Daniel-Gubisch



Die gezahnten "Parker-Langenbeck"-Wundhaken (22.18.22) halten das Weichgewebe auseinander ohne abzurutschen.


The toothed "Parker-Langenbeck" retractors (22.18.22) spread the soft tissue without slipping.



Die drei "Daniel-Gubisch"-Raspatorien (26.48.10/12/14) haben eine zunehmende Krümmung, gebogene Spitzen und scharfe Seiten. Damit kann das Perichondrium ohne Beschädigung ringsherum leicht abgehoben werden.

The three "Daniel-Gubisch" raspatories (26.48.10/12/14) feature an increasing curvature, curved tips and sharp sides, making it possible to slightly lift the perichondrium all the way around without causing any damage.

Set für die Rippenspanentnahme
Set for Rib Graft Harvesting

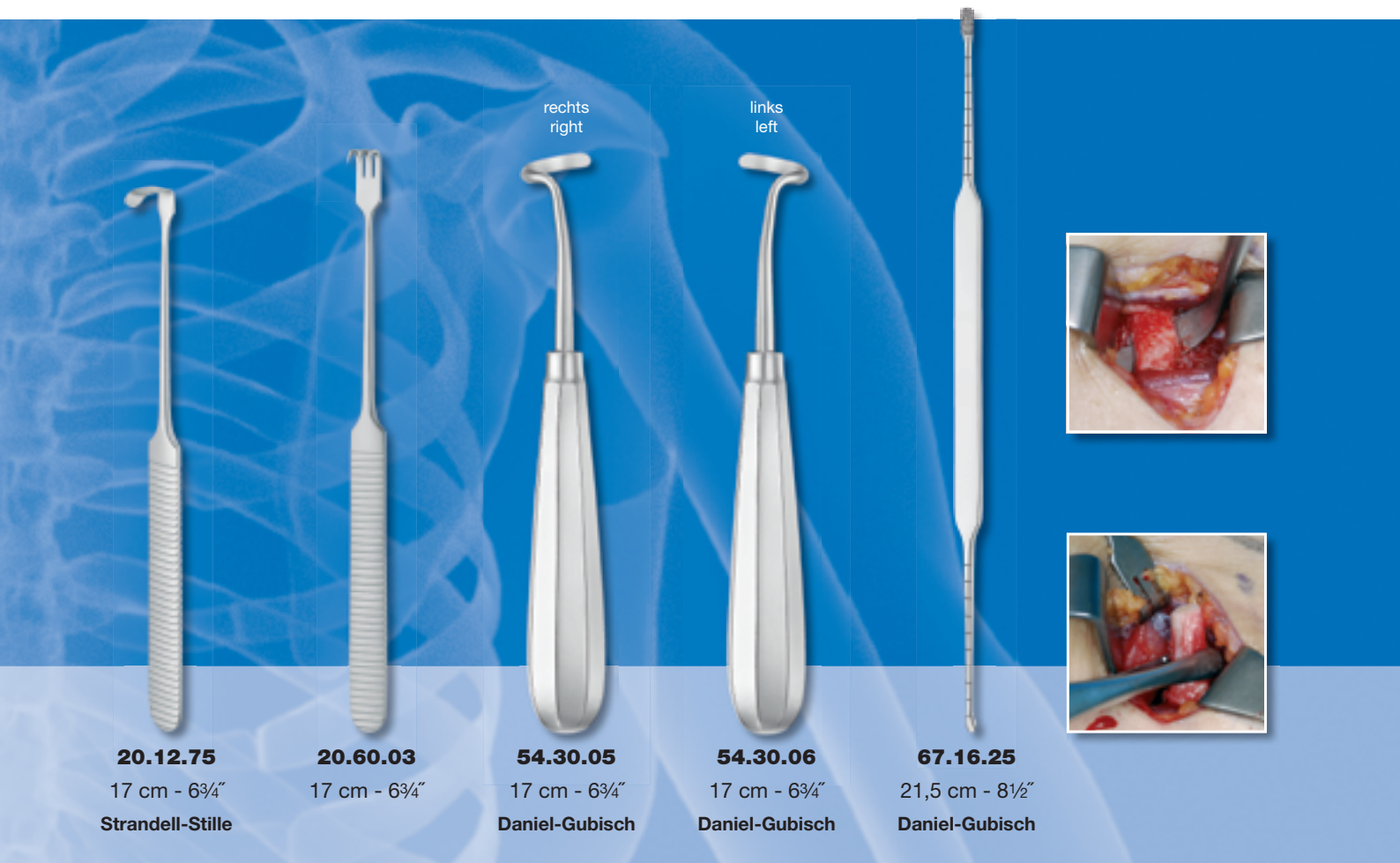

20.12.75
 17 cm - 6¾"
 Strandell-Stille

20.60.03
 17 cm - 6¾"

rechts
 right
54.30.05
 17 cm - 6¾"
 Daniel-Gubisch

links
 left
54.30.06
 17 cm - 6¾"
 Daniel-Gubisch

67.16.25
 21,5 cm - 8½"
 Daniel-Gubisch


Die "Daniel-Gubisch"-Rippenraspatorien (54.30.05/06) sind deutlich feiner als bisherige Instrumente und daher für den Zweck der Knorpelentnahme besonders gut geeignet.

The "Daniel-Gubisch" rib raspatories (54.30.05/06) are markedly finer than previous instruments and are therefore ideally suited for extracting cartilage.



Das doppelendige "Daniel-Gubisch" Raspatorium (67.16.25) mit seinem scharfen abgerundeten Ende und dem flachen abrasiven Ende ist perfekt zum Abschieben des Perichondriums geeignet.

The double-ended "Daniel-Gubisch" raspatory (67.16.25) with its sharp rounded end and the flat abrasive end is perfectly suited for removing the perichondrium.

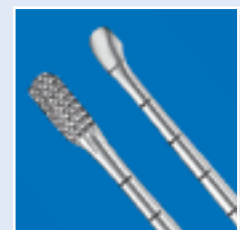




Zusätzliche Instrumente
Additional Instruments

DANIEL - GUBISCH

Rib Harvest Set

Zusätzliche Instrumente
 Additional Instruments

01.22.10	Scalpel blade · figure 10 · sterile · packing unit 100 pieces	1x
01.27.03	Scalpel handle · no 3 · standard · 12.5 cm	1x
03.06.14	Operating scissors · straight · sharp/blunt · 14.5 cm	1x
06.07.14	Tissue forceps · straight · slim · 1 x 2 teeth · 14.5 cm	1x
06.25.12	ADSON-BROWN Tissue forceps · straight · 7 x 7 teeth · 12 cm	1x
10.18.68	MAYO-HEGAR "HM" Needle holder · 18 cm	1x
47.31.02	Round bowl · Ø 60 mm · height 30 mm · 60 ml	1x
47.31.04	Round bowl · Ø 80 mm · height 40 mm · 160 ml	1x
47.31.06	Round bowl · Ø 110 mm · height 55 mm · 400 ml	1x
87.32.00	Knife electrode · straight · Ø 4 mm	1x
● 87.33.00	Knife electrode · Ø 2.4 mm	1x
88.00.20	Bipolar cable · Ø 12.5 mm · 3 m	1x
88.70.16	Bipolar forceps · bayonet · 2 mm · blunt · 19 cm	1x
204.55.66	KELLY Dissecting scissors · supercut plus · curved · 16 cm	1x

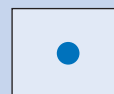

Rollin K. Daniel's CALIFORNIA HOT PINK



COLOR YOUR TOOLS!™

DANIEL - GUBISCH

Rib Harvest Set

Satz komplett
Set complete

54.30.10C

bestehend aus:
consisting of:

07.15.15C	RUSS. MODELL Tissue forceps · 15 cm	1x
20.12.75C	STRANDELL-STILLE Retractor · 6 x 15 mm · 17 cm	2x
20.60.03C	Retractor · 3 teeth · sharp · 8 mm · 17 cm	2x
22.18.21C	PARKER-LANGENBECK (US ARMY) Retractor · double-ended · 21 cm · set/2	1x
22.18.22C	PARKER-LANGENBECK (US ARMY) Retractor · double-ended · serrated · 21 cm · set/2	1x
26.48.10C	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · slight curved · 17.5 cm	1x
26.48.12C	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · medium curved · 17 cm	1x
26.48.14C	DANIEL-GUBISCH Raspatory · 6 mm · sharp · strong curved · 16 cm	1x
54.30.05C	DANIEL-GUBISCH Rib raspatory · right · 5 mm · sharp · 17 cm	1x
54.30.06C	DANIEL-GUBISCH Rib raspatory · left · 5 mm · sharp · 17 cm	1x
67.16.25C	DANIEL-GUBISCH Raspatory · double-ended · 4 mm · sharp/abrasive · 21.5 cm	1x
49.90.06	Tray (without instruments)	1x

||| CMF

||| SURGICAL

||| NEURO+SPINE



Medicon eG

Gänsäcker 15
D-78532 Tuttlingen

P. O. Box 44 55
D-78509 Tuttlingen

Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

E-Mail: sales@medicon.de
Internet: www.medicon.de

Germany

Modelländerungen vorbehalten
Patterns are subject to change
Salvo modificaciones
Tous droits réservés des changements de modèle
Ci riserviamo la facoltà di cambiamenti nei modelli

Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany
Impresso en Alemania
Imprimé en Allemagne
Stampato in R.F.G.
Trykkes i Tyskland

© Copyright 09/2013

451 .02.54

medicon[®]

||| SURGICAL

